




**Maximieren Sie Ihre Rentabilität –
minimieren Sie Stillstandzeiten!**

AMECARE M2M (Machine to Machine) ist ein einzigartiger und leistungsfähiger SPECTRO-Service, um Systemausfälle durch kontinuierliche Fernüberwachung sämtlicher Warn- und Fehlermeldungen Ihres Gerätes zu verhindern. In Kombination mit der AMECARE-Wartung können Ausfallrisiken drastisch reduziert werden.

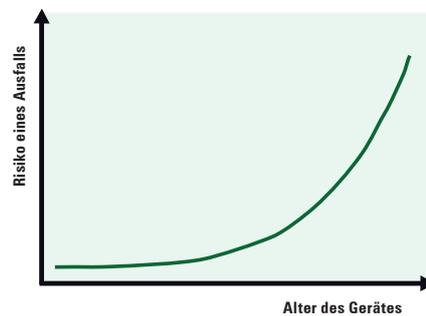

Die Erfahrung zeigt, dass ohne angemessene Wartung die Wahrscheinlichkeit einer Störung exponentiell mit dem Alter eines Gerätes steigt. Regelmäßige Wartung hingegen führt zu einer drastischen Verringerung des Ausfallrisikos und verlängert die Nutzungsdauer des Gerätes.

SPECTRO-Geräte verfügen über ein intelligentes Diagnosesystem, das Informationen über den Status wichtiger Komponenten liefert. Durch dieses System kann die Ursache eines Geräteausfalls schnell identifiziert und die Instandsetzung deutlich beschleunigt werden. Zudem liefert das Diagnosesystem Informationen, um präventive Maßnahmen vorzunehmen.

AMECARE M2M nutzt diese Informationen, um auf eine Verschlechterung des Zustands von Komponenten zu reagieren und so Fehler und Ausfallzeiten zu vermeiden. Sobald das Spektrometer mit SPECTROs zentralem M2M-Server verbunden ist, sendet das Diagnosesystem in regelmäßigen Zeitabständen selbständig Statusinformationen zum Server, der die eingehenden Statusinformationen automatisch analysiert. Sobald die Analyse auf eine Komponenten-Verschlechterung oder einen Fehler hindeutet, wird Ihr SPECTRO-Service vor Ort alarmiert. Dieser wird entsprechend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

AMECARE M2M übermittelt nur Informationen, die die Hardware und den iCAL-Prozess betreffen. Analysemethoden und -Ergebnisse werden aus Datenschutzgründen nicht übermittelt. AMECARE M2M ist unidirektional und sicher: Die verschlüsselten Informationen bezüglich Hardware und iCAL-Prozess können nur vom Instrument zum M2M-Server gesendet werden. Abgesehen vom „Handshake“ zu Beginn der Datenverbindung werden vom Server keinerlei Informationen an das Gerät übermittelt. Dies dient dem Schutz des Geräts und stellt eine maximale Systemintegrität sicher.



SPECTROLAB M12 Spektrometer AMECARE M2M

- *Kontinuierliche Überwachung wichtiger Komponenten*
- *Identifizierung und Anzeige von Fehleinstellungen, Funktionsverschlechterungen und Fehlern*
- *Benachrichtigung des lokalen SPECTRO-Service für einen proaktiven Support*

AMECARE M2M hält SPECTRO über den Status Ihres Geräts auf dem Laufenden. Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- *Verringertes Ausfallrisiko*
- *Schnellerer Support*
- *Kürzere Reparaturzeiten*

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Warnungen und Fehlermeldungen, die AMECARE M2M für das SPECTROLAB überwacht (dort, wo anwendbar; Komponentennachrichten können je nach Gerät variieren):

Optisches System:

Überwachung der Temperatur des optischen Systems und des Status der UV-PLUS Reinigung inklusive der verbleibenden Zeit

iCALisierung:

Überwachung des Status der iCALisierung, dem zentralen Indikator des allgemeinen Gerätezustands

Energieversorgung, Auslesesystem und andere elektronische Komponenten:

Überwachung von Fehleinstellungen, Signal- und Komponentenfehlern

Verfügbar für:

SPECTROLAB LAVM12

SPECTROLAB LACM12



Höchstleistung und maximale Rendite über die gesamte Nutzungsdauer Ihrer Geräte.

Wir erreichen dies durch:

- Proaktive Wartung Ihrer Betriebsmittel für maximale Verfügbarkeit
- Optimierte Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen
- Förderung der Anwender durch Zugang zu Produkt- und Anwendungsspezialisten



www.spectro.com

DEUTSCHLAND

SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Boschstraße 10
D-47533 Kleve
Tel: +49.2821.892.2100
Fax: +49.2821.892.2202
spectro.sales@ametek.com

U.S.A.

SPECTRO Analytical Instruments Inc.
91 McKee Drive
Mahwah, NJ 07430
Tel: +1.800.548.5809
+1.201.642.3000
Fax: +1.201.642.3091
spectro-usa.sales@ametek.com

HONG KONG (Asia-Pacific)

SPECTRO Analytical Instruments (Asia-Pacific) Ltd.
Unit 1603, 16/F, Tower III,
Enterprise Square,
No. 9 Sheung Yuet Road,
Kowloon Bay, Kowloon
Tel: +852.2976.9162
Fax: +852.2976.9132
spectro-ap.sales@ametek.com

SPECTRO ist weltweit in mehr als 50 Ländern aktiv. Niederlassungen und Vertretungen finden Sie unter www.spectro.de/weltweit © 2015 AMETEK Inc., all rights reserved, subject to technical modifications, Rev. 0 • J-15 • Registered trademarks of SPECTRO Analytical Instruments GmbH SPECTRO: USA (3,645,267); EU (005673694); "SPECTRO": EU (009693763); SPECTROLAB: EU (1069339); Germany (39604365); USA (4,103,747); China (1069339); Japan (1069339); South Korea (1069339); iCAL: USA (3,189,726), EU (003131919)
Photos: SPECTRO, Corbis, Getty Images, Stockxpert, iStockphoto